


Bioline Ketamine Card

ชุดทดสอบสารเสพติดเคตามีนในปัสสาวะแบบขั้นตอนเดียว


คุณลักษณะของชุดทดสอบ

- เป็นชุดทดสอบหาสารเสพติดเคตามีนและเมตาบอไลต์ในปัสสาวะมนุษย์
- ด้วยเทคนิคอิมมูโนโครมาโตกราฟี โดยอาศัยหลักการ Competitive Binding Immunoassay
- สามารถตรวจพบเคตามีน และเมตาบอไลต์ได้ตั้งแต่ระดับความเข้มข้น 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร
- สามารถอ่านผลการทดสอบได้ชัดเจนด้วยตาเปล่าภายในเวลาเพียง 5 นาที
- ภายใน 1 กล่อง สามารถใช้ทดสอบได้ 40 การทดสอบ


วิธีการทดสอบ

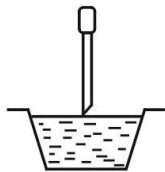

ตัวอย่างปัสสาวะ

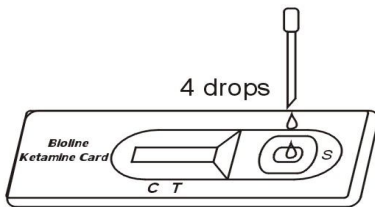

หยดปัสสาวะจำนวน 4 หยด ลงในหลุม "S"

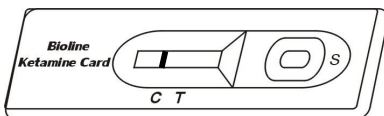


รออ่านผลที่เวลา 5 นาที

ผลิตโดย :

บริษัท แปซิฟิก ไบโอเทค จำกัด
42 หมู่ที่ 4 ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์


จำหน่ายโดย :

บริษัท แปซิฟิก ไบโอเทค จำกัด
6 สนธิวัฒนา 3 ซ.ลาดพร้าว 110 ถ.ลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
โทร. 02-5302760, 02-9351281 โทรสาร 02-9318340
E-mail: pbsales@brianet.com

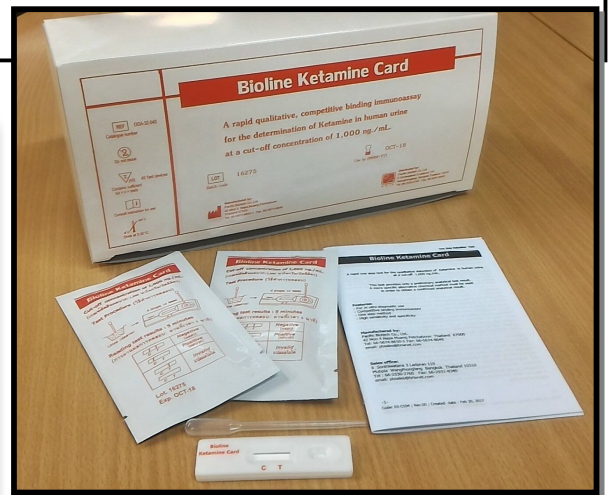


การแปลผลการทดสอบ

ผลบวก :

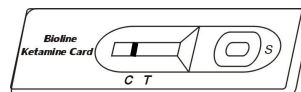



เกิดแถบสีม่วงแดงขึ้นที่ตำแหน่ง C เท่านั้น หมายถึง ผลการตรวจเป็นผลบวก
หรือมีปริมาณเคตามีน หรือเมตาบอไลต์มากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร

ผลลบ :

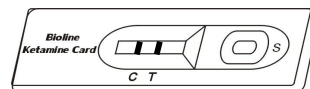

เกิดแถบสีม่วงแดงขึ้นที่ตำแหน่ง C และ T หมายถึง ผลการตรวจเป็นผลลบ
หรือมีปริมาณเคตามีน หรือเมตาบอไลต์น้อยกว่า 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร หรือไม่มีเลย

แปลผลไม่ได้ :

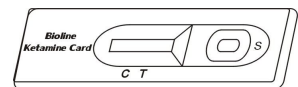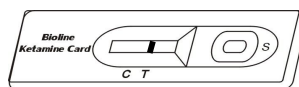

ไม่เกิดแถบสีม่วงแดงที่ตำแหน่ง C หรือเกิดแถบสีม่วงแดงเฉพาะที่ตำแหน่ง T
ดังนั้น ควรทำการทดสอบด้วยชุดทดสอบใหม่

หมายเหตุ: ระดับความเข้มข้นบริเวณแถบสีที่ตรวจอาจมีการแปรผันได้
กรณีที่ปรากฏแถบสีที่ตรวจ แม้ว่าแถบสีจะซีดจางก็สามารถอ่านเป็นผลลบได้