
วิธีการเก็บตัวอย่าง

1. เจาะเลือด peripheral blood 10 ml. ใส่ใน Special collection tube

2. ผสมให้เข้ากัน โดยการกลับหลอดไปมา 8 – 10 ครั้ง เบาๆ เพื่อป้องกันการแข็งตัวเลือด

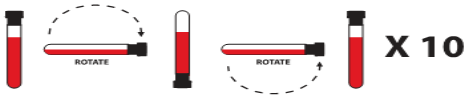

3. ทำการส่งสิ่งส่งตรวจมายังห้องปฏิบัติการ บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จำกัด ภายใต้อุณหภูมิที่กำหนด (6 -37 °C) ภายใน 72 ชั่วโมง (ระบุวัน-เวลา เจาะเลือด ในใบ request)

สิ่งที่ควรทราบและข้อกำหนดการใช้

- ควรวาง tube ในลักษณะตั้งตรง ที่อุณหภูมิห้อง และเก็บให้พ้นแสง
- ถึงแม้ว่าการใช้ Special collection tube จะสะดวกต่อการเก็บและการจัดส่ง whole blood ที่อุณหภูมิห้อง และ fetal cell-free DNA จะคงสภาพอยู่ได้นานกว่าเมื่อเทียบกับการเก็บเลือดใน EDTA tube แต่อย่างไรก็ตาม โอกาสที่จะเกิดการ resampling หรือ re-construct DNA library สำหรับขั้นตอน sequencing จะสูงกว่าเมื่อเทียบกับการเก็บเลือด ใน EDTA tube

สาเหตุการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ

- อุณหภูมิ/เวลา การจัดส่งไม่เป็นไปตามที่กำหนด
- ปริมาตรตัวอย่างไม่เป็นไปตามที่กำหนด
- ขั้นตอนการเตรียมสิ่งส่งตรวจไม่เป็นไปตามที่กำหนด
- Heavy hemolysis/ blood clotting

เอกสารที่สำคัญ ส่งพร้อมกับสิ่งส่งตรวจ

- ใบ request ของรายการตรวจ NICE
- ใบ informed consent